



**KATANA™ Zirconia**

## DISEÑO REVOLUCIONARIO DE DISCO TODO EN UNO

Esta innovadora combinación de materia prima de zirconia de alta translucidez y resistencia empoderará tu laboratorio dental. **KATANA™ Zirconia YML** ofrece eficiencia, claridad, simplicidad y precisión cuando se trata de manipular un producto sin comprender la calidad de su resultado.



**KATANA™ ZIRCONIA YML**  
EMPODERA TU LABORATORIO DENTAL  
DESCUBRE LA NUEVA EVOLUCIÓN MULTI-CAPA

**1100** MPa  
SUPER FUERTE

**49** %  
TRANSLUCIDEZ

**54** MIN  
SUPER RÁPIDO

# ¿POR QUÉ UTILIZAR **KATANA™ Zirconia YML**?

## SOLUCIÓN TODO EN UNO

Se puede cubrir todo el espectro de indicaciones gracias a la combinación de alta translucidez y alta resistencia.

## ESTRUCTURA MULTICAPA INCONSÚTIL

**KATANA™ Zirconia YML** combina tres materias primas con diferentes contenidos de yttria que combinan una gradación bien equilibrada de color/translucidez y resistencia a la flexión.

## ESTÉTICA SENCILLA


La tecnología multicapa impecable elimina las líneas de transición visibles, enfatizando el color natural y la translucidez, asegurando un procedimiento simplificado que ahorra tiempo.

## HORNEADO CONTROLADO

La precisión de ajuste de las restauraciones después del proceso de sinterización final reduce los riesgos de refabricación. Sin pérdida de tiempo y materiales.

## PROCESAMIENTO RÁPIDO

¿Rehacer y acelerar los casos? La sinterización de alta velocidad (54 minutos) ofrece oportunidades completamente nuevas. Termine el trabajo fácilmente en un día.

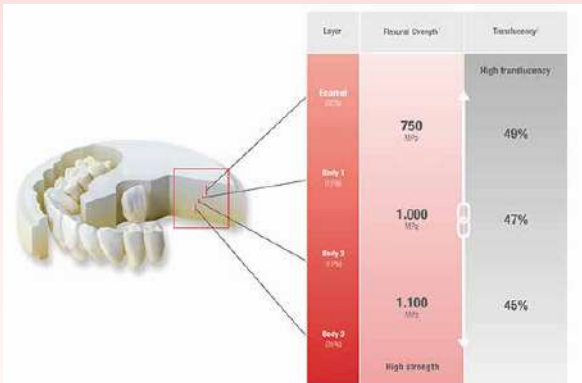

## TECNOLOGÍA INNOVADORA DE VARIAS CAPAS

**KATANA™ Zirconia YML** se desarrolló sobre la base del concepto de ser “realista”, que expresa con precisión y naturalidad el color y la translucidez de los dientes naturales.

### Capa de esmalte

Proporcionar una alta translucidez que armoniza con los dientes anteriores.

### Cuerpo Capa 1

Para proporcionar un color uniforme y translucidez hacia la zona de esmalte.

### Cuerpo Capa 2, 3

Para proporcionar un color profundo y vivo mientras reduce el blanqueamiento.

## VERSATILIDAD DEL RANGO DE APLICACIÓN

### SOLUCIÓN TODO EN UNO

Se ofrece una flexibilidad de diseño excepcional, desde carillas hasta restauraciones de arcada completa. En cada caso, puede elegir un diseño monolítico, recortado o de estructura con el procedimiento de fabricación adecuado según las necesidades individuales.

- ✓ Carillas
- ✓ Inlay / Onlay
- ✓ Corona anterior / posterior
- ✓ Puente de gran amplitud
- ✓ Subestructura



## APROVECHANDO AL MÁXIMO LAS CARACTERÍSTICAS DE **KATANA™ Zirconia YML**

### HORNEADO CONTROLADO

Con sus diferentes capas de composición, se logra una contracción de alta precisión y valores CTE estables mediante el control de todo el proceso, desde el refinado hasta el moldeado. El amplio control de calidad en combinación con materias primas únicas desarrolladas internamente brindan nuestra mejor zirconia de todos los tiempos.

Nos distinguimos por esta producción interna única de materias primas de óxido de zirconio. Garantiza un material en el que siempre puede confiar



Guadalajara (Matriz)  
Industria del Plástico 2113  
Fracc. Industrial Zapopan, Norte  
Zapopan, Jalisco, México.  
mdc@dental.com.mx  
+52 (33) 3833-0333

CDMX  
Alzate 118, Eje 1 Norte  
Col. Santa María de la Rivera  
Delegación Cuauhtémoc  
mdcmex@dental.com.mx  
+52 (55) 5547-4747